

The logo consists of two interlocking loops. The left loop is dark blue and the right loop is light blue. Inside the light blue loop is a small white circle.

ヘルスコネクト

設定ガイド

ヘルスコネク ト 初期設定手順 < Android14以降 >

※機種、OSバージョンによって設定方法が異なります

※Android14以降の場合、「ヘルスコネク ト」は標準でインストールされており、事前の準備は不要です。

1 ヘルスコネク トにアクセスする


端末の「設定」アプリから以下の手順でヘルスコネク トを開きます



「セキュリティとプライバシー」




「プライバシー管理」

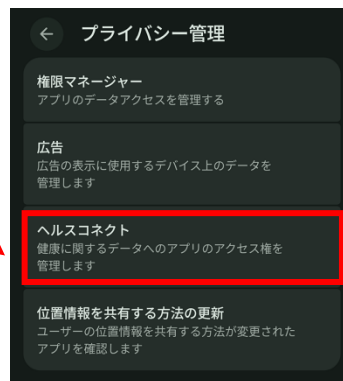

「ヘルスコネク ト」

2 アクセス権を変更する

RenoBodyアプリに同期するアクティビティを設定します

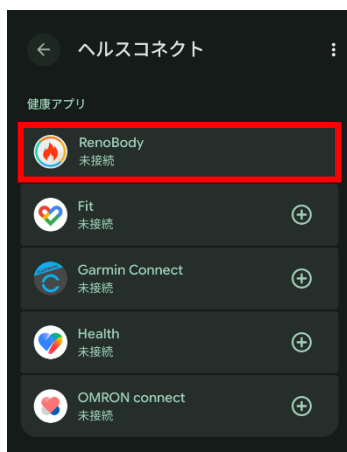

3 デバイス設定を変更する

RenoBodyアプリのデバイス設定から「ヘルスコネク ト」を選択します



ヘルスコネクト 初期設定手順 < Android14未満 >

※機種、OSバージョンによって設定方法が異なります

※Android14未満の場合、ストアから事前に「Google Fit」「ヘルスコネクト」をインストールして初期設定してください。
※Android14未満の場合、歩数のカウントをするためには「Google Fit」が必要となります。

- ・「Google Fit」未設定の場合・・・手順【1】に進む
- ・「Google Fit」設定済の場合・・・手順【3】に進む


1 Google Fitをインストールする

ストアで「Google Fit」と検索しインストールします



2 Google Fitの初期設定を完了する


初期設定をし、歩数が計測されていることを確認します

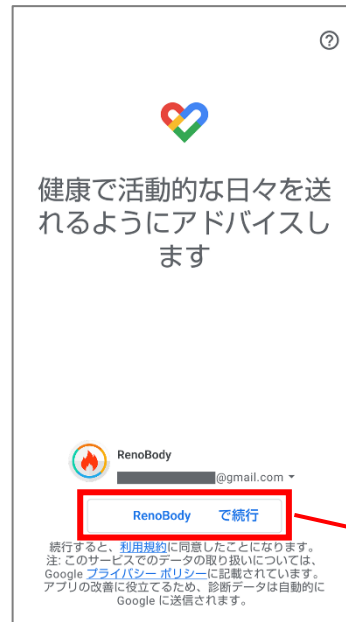

Googleアカウントを選択



基本情報を入力

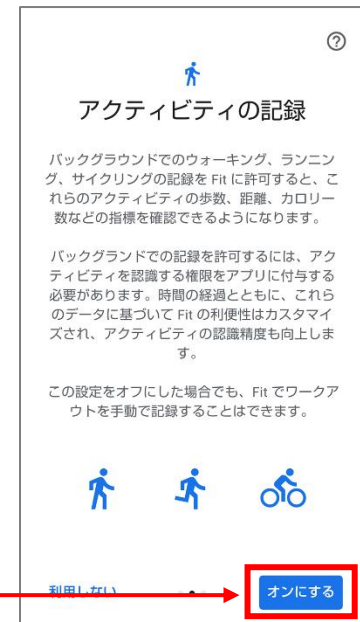

アクティビティの記録をオンにする


ヘルスコネク ト 初期設定手順 < Android14未満 >

※機種、OSバージョンによって設定方法が異なります

※Android14未満の場合、ストアから事前に「Google Fit」「ヘルスコネク ト」をインストールして初期設定してください。
※Android14未満の場合、歩数のカウントをするためには「Google Fit」が必要となります。

3 ヘルスコネク トをインストールする

ストアで「ヘルスコネク ト」と検索しインストールします

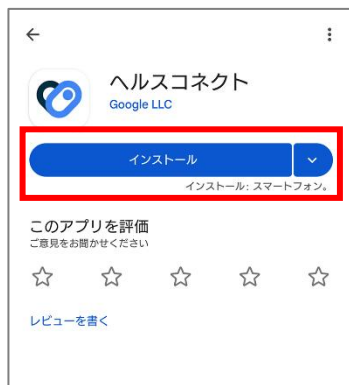


4 ヘルスコネク トにアクセスする

端末の「設定」アプリから以下の手順でヘルスコネク トを開きます



「アプリと通知」

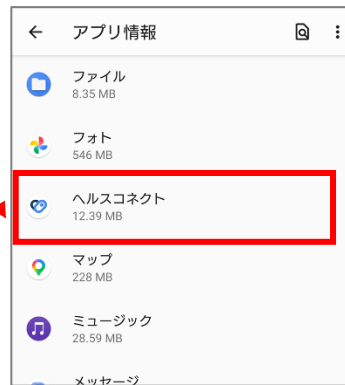

「ヘルスコネク ト」



ストアで「ヘルスコネク ト」と検索し「開く」をタップする

5 アクセス権を変更する

RenoBodyアプリに同期するアクティビティを設定します



ヘルスコネクト 初期設定手順 < Android14未満 >

※機種、OSバージョンによって設定方法が異なります

※Android14未満の場合、ストアから事前に「Google Fit」「ヘルスコネクト」をインストールして初期設定してください。
※Android14未満の場合、歩数のカウントをするためには「Google Fit」が必要となります。

6 Google Fitとヘルスコネクトを同期する

Google Fitの「設定」から以下の手順でGoogle Fitとヘルスコネクトを同期します



7 デバイス設定を変更する

RenoBodyアプリのデバイス設定から「ヘルスコネクト」を選択します



「ヘルスコネクト」に機器や他サービスを接続すると、RenoBodyへ連携される際は＜統合されたデータ＞が連携されます。
以下の手順で、ウェアラブル機器のデータと一致させたり、端末本体の歩数を採用するなど、データのソースを調整することが出来ます。

端末の「設定」アプリからヘルスコネクトを開いて、以下の流れで「データソースと優先度」にアクセスします



各データソースの右側にあるMENU（三点リーダー）から、ソースの削除と優先度の変更が可能です。

(削除したソースを再追加する場合)
TOPの+ボタンから再追加が可能です

← データソースと優先度

アクティビティ

データの合計

🔥 2,780 歩 7月3日

🔥 1.776 km 7月3日

データソース

1	Fit	⋮
2	Mi Fitness	⋮
3	XQ-EC44	⋮

■ MENU（三点リーダー）

【下に移動】・・・対象ソースのデータが採用される優先度を下げます

【削除】・・・対象ソースのデータを連携対象から外します

(使用例)

左図のデータソースの場合、

- 「Mi Fitness」のみを残して他を削除すると、「Mi Fitness」のデータと一致します
- 「XO-EC44」のみを残して他を削除すると、スマートフォン端末での歩数計測となります

⇒ 「Fit」 はGoogle Fitを指します

⇒他社サービスはサービス名称で表示されます

⇒スマートフォン端末は型式番号で表示されます

